

MOZEC™ NC. ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Система катетера	Катетер быстрого обмена (Rx)
Материал баллона	Нейлон - нерастяжимый
Доступные длины баллонов (мм)	8, 10, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38, 45
Доступные диаметры баллонов (мм)	2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50
Рабочая длина катетера	142 см
Макс. Совместимость с проводником	0.014" (0.36 мм)
Совместимость с направляющим катетером	5F (мин. внутр. диаметр. 0.056" / 1.42 мм)
Покрытие дистального shaft	Биосовместимое, гидрофильное и смазывающее покрытие от дистальной базы баллона до порта быстрого обмена
Рентгеноконтрастные маркеры баллона	2 – Платиново-иридиевые
Длина наконечника	3.5±0.5 мм
Проксимальный диаметр shaft	1.98 F
Дистальный диаметр shaft	2.7 F
Маркеры на проксимальном shaftе	Брахиальный и феморальный маркеры в 90 и 100 см от дистального конца
Номинальное давление (НД)	12 атм для всех диаметров
Расчёное давление разрыва (РДР)	20 атм для всех диаметров

MOZEC™ NC. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Диам./Длина	8мм	10мм	13мм	15мм	18мм	
2.00мм	MNC20008	MNC20010	MNC20013	MNC20015	MNC20018	
2.25мм	MNC22508	MNC22510	MNC22513	MNC22515	MNC22518	
2.50мм	MNC25008	MNC25010	MNC25013	MNC25015	MNC25018	
2.75мм	MNC27508	MNC27510	MNC27513	MNC27515	MNC27518	
3.00мм	MNC30008	MNC30010	MNC30013	MNC30015	MNC30018	
3.50мм	MNC35008	MNC35010	MNC35013	MNC35015	MNC35018	
4.00мм	MNC40008	MNC40010	MNC40013	MNC40015	MNC40018	
4.50мм	MNC45008	MNC45010	MNC45013	MNC45015	MNC45018	
Диам./Длина	23мм	28мм	30мм	35мм	38мм	45мм
2.00мм	MNC20023	MNC20028	MNC20030	MNC20035	MNC20038	MNC20045
2.25мм	MNC22523	MNC22528	MNC22530	MNC22535	MNC22538	MNC22545
2.50мм	MNC25023	MNC25028	MNC25030	MNC25035	MNC25038	MNC25045
2.75мм	MNC27523	MNC27528	MNC27530	MNC27535	MNC27538	MNC27545
3.00мм	MNC30023	MNC30028	MNC30030	MNC30035	MNC30038	MNC30045
3.50мм	MNC35023	MNC35028	MNC35030	MNC35035	MNC35038	MNC35045
4.00мм	MNC40023	MNC40028	MNC40030	MNC40035	MNC40038	MNC40045
4.50мм	MNC45023	MNC45028	MNC45030	MNC45035	MNC45038	MNC45045

ВНИМАНИЕ: Данное изделие предназначено для использования врачом или под его руководством. Перед использованием для предупреждения потенциальных осложнений, связанных с использованием этого устройства важно внимательно прочитать информацию на упаковке и инструкцию по использованию, прилагаемую к этому устройству. Тесты и данные по файлу в Meril Life Sciences. Все рисунки представляют собой только представления художников, и их нельзя рассматривать как технический чертеж или фотографии. Информация для использования только в странах с применённой регистрацией данного продукта министерством здравоохранения.



МЕРИЛ
Мерил Лайф Сайенсиз Pvt. Ltd.
Сурвей №135/139, Билахия Хаус,
Муктананг Марг, Чала, Вапи 396 191.
Гуджарат. Индия.
Т +91 260 305 2100
F +91 260 305 2125

Мерил, Инк
Вилидж Бульвар, Сьют 200
Принстон, Нью-Джерси 08540.
США.
Тел.: +1 609 951 2287
Факс: +1 609 520 1702
Мерил Южная Америка
ДОК МЕД ЛТДА
Ал. Дос Тупиниуинс,
1079-Сэл: 04077-033-Моэма.
Сан-Паулу, Бразилия.
Тел.: +55 11 3624 5935
Факс: +55 11 3624 5936
Мерил ГмбХ
Улица Борнхаймер, 135-137
Д-53119 Бонн, Германия.
Тел.: +49 228 7100 4000
Факс: +49 228 7100 4001

Мерил Тибби Сихазлар
Ималат ве Тикарет А.С.
6, мимар синах Мах.,
Кавусбаси Кад. Оздэ Сок.
Аудин Екси Из меркези Кат:1
Секмекой/Истанбул, Турция
Тел.: +90 53 2272 5172

Почта: askinfo@merillife.com
Сайт: www.merillife.com

Mozec™ – это зарегистрированная торговая марка Мерил Лайф Сайенсиз Pvt. Ltd.

MNCBROCHURE003MLS/20160902IND

MOZEC™ NC

ЧЧКА Катетер быстрого обмена для баллонной дилатации

Meril

MOZEC™ NC

ЧЧКА Катетер быстрого обмена для баллонной дилатации

MOZECTM NC

ЧЧКА Катетер быстрого обмена для баллонной дилатации

Искусство ремесла для
мастеров ангиографии

Испытайте контролируемое и уверенное расширение с MOZECTM NC

Мягкий наконечник, сделанный из медицинского класса РЕВАХ для
способствования продвижению катетера к стенозу и сквозь него

Низкий профиль
входа наконечника
для лёгкого
пересечения


Слияние дистального конца
внутреннего тьюбинга и баллона
без выступов

Биосовместимое, гидрофильное, смазывающее
покрытие от дистальной базы баллона до порта
быстрого обмена

Короткие обрывистые плечи баллона
2 складки для $\varnothing$ 2.00 мм
3 складки для $\varnothing$ 2.25 - 4.50 мм

Нейлон как материал баллона
обеспечивает неподатливость
при высоких давлениях

Контролируемое расширение баллона для идеальной
податливости при высоком давлении

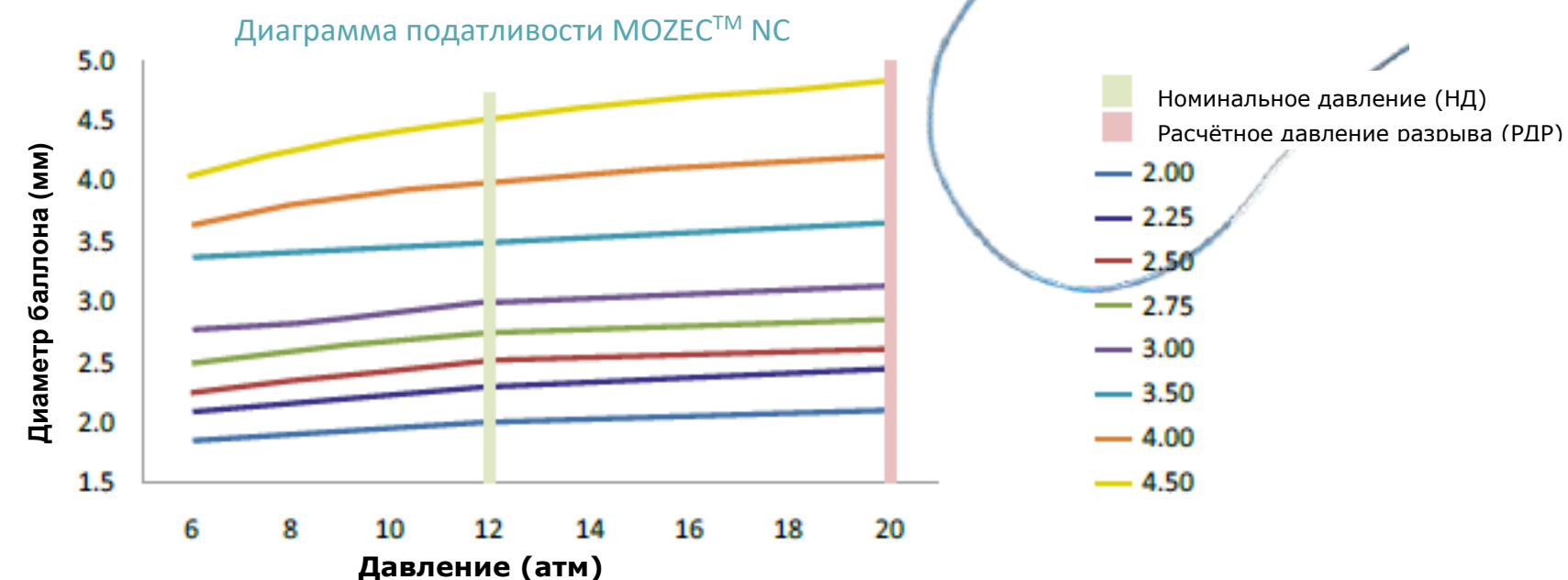

MOZECTM NC, очень гибкий и с низким уровнем
кроссинга, спроектирован для получения
максимального давления и соответствия
клиническим потребностям