

МОЗЕК™ ЧКТА

Катетер для баллонной дилатации

Технические спецификации

Система катетера	Система доставки по проводнику (OTW)
Материал баллона	РЕВА (полиэфирблокамид)
Рабочая длина катетера	80±2 см и 135±2 см
Максимальная совместимость с проводником	0.035"
Минимальная совместимость с направляющим катетером	5F-8F зависит от диаметра и длины баллона (см. инструкцию по применению для более подробной информации)
Покрытие дистального shaft	Биосовместимое, гидрофильное и смазывающее покрытие
Рентгенконтрастные маркеры баллона	2 - Платиново-иридиевые
Длина кончика	5±1 мм
Диаметр shaft	5F (1.72 мм / 0.068")
Номинальное давление (НД)	6/7атм, зависит от диаметра и длины баллона (см. инструкцию по применению для более подробной информации)
Расчетное давление разрыва (РДР)	12-14 атм, зависит от диаметра и длины баллона (см. инструкцию по применению для более подробной информации)

МОЗЕК™ ЧКТА ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Катетер с рабочей длиной 80 см

Диаметр/ Длина	Длина баллона (мм)						
	20 мм	30 мм	40 мм	50 мм	60 мм	80 мм	120 мм
3.0	МО35030020А	МО35030030А	МО35030040А	МО35030050А	МО35030060А	МО35030080А	МО350300120А
4.0	МО35040020А	МО35040030А	МО35040040А	МО35040050А	МО35040050А	МО35040080А	МО350400120А
5.0	МО35050020А	МО35050030А	МО35050040А	МО35050050А	МО35050050А	МО35050080А	МО350500120А
6.0	МО35060020А	МО35060030А	МО35060040А	МО35060050А	МО35060050А	МО35060080А	МО350600120А
7.0	МО35070020А	МО35070030А	МО35070040А	МО35070050А	МО35070050А	МО35070080А	МО350700120А
8.0	МО35080020А	МО35080030А	МО35080040А	МО35080050А	МО35080050А	МО35080080А	МО350800120А

Катетер с рабочей длиной 135 см

Диаметр/ Длина	Длина баллона (мм)						
	20 мм	30 мм	40 мм	50 мм	60 мм	80 мм	120 мм
3.0	МО35030020В	МО35030030В	МО35030040В	МО35030050В	МО35030060В	МО35030080В	МО350300120В
4.0	МО35040020В	МО35040030В	МО35040040В	МО35040050В	МО35040050В	МО35040080В	МО350400120В
5.0	МО35050020В	МО35050030В	МО35050040В	МО35050050В	МО35050050В	МО35050080В	МО350500120В
6.0	МО35060020В	МО35060030В	МО35060040В	МО35060050В	МО35060050В	МО35060080В	МО350600120В
7.0	МО35070020В	МО35070030В	МО35070040В	МО35070050В	МО35070050В	МО35070080В	МО350700120В
8.0	МО35080020В	МО35080030В	МО35080040В	МО35080050В	МО35080050В	МО35080080В	МО350800120В

МЕРИЛ

Мерил Лайф Сайенсиз Пвт. Лтд.
Муктананд Марг, Чала,
91Вапи-396 191, Гуджарат, Индия.
Тел.: +91 260 3052 100
Факс: +91 260 3052 125

Мерил ГмбХ
Улица Борнхаймер, 135-137
Д-53119 Бонн, Германия.
Тел.: +49 228 7100 4000
Факс: +49 228 7100 4001

Мерил Южная Америка
ДОК МЕД ЛТДА
Ал. Дос Тупиниуинс,
1079-Сэп: 04077-033-Моэма.
Сао Пауло, Бразилия.
Тел.: +55 11 3624 5935
Факс: +55 11 3624 5936

Мерил Тибби Сихазлар
Ималат ве Тикарет А.С.
6, мимар синах Мах.,
Кавусбаси Кад. Оздэ Сок.
Аудин Екси Из меркези Кат:1
Секмекой/Истанбул, Турция
Тел.: +90 53 2272 5172

Почта: askinfo@merillife.com
Сайт: www.merillife.com
МОЗЕК[™] ЧКТА – это зарегистрированная торговая
марка Мерил Лайф Сайенсиз Пвт. Лтд.

МОЗЕК™ ЧКТА

Катетер для баллонной дилатации

Мастерство для работы сосудов

Низкий профиль ЧКТА баллона доступен в больших длинах для обширных диффузных поражений

- Низкий профиль наконечника для входа и преодоления сложных поражений
- Высокая гибкость, проходимость и проталкиваемость
- Устойчивый к излому шaft, система доставки по проводнику
- Гидрофильное покрытие на дистальной части для повышенной проходимости
- Быстрое время инфляция и дефляция
- Доступно 84 типоразмера: OTW (0.035" – совместимость с проводником); Ø – 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 мм и l – 20, 30, 40, 50, 60, 80, 120 мм

Материал среднерастяжимого баллона обеспечивает равномерное растяжение

График - Растяжимость МОЗЕК ЧКТА для длин от 20 до 80 мм

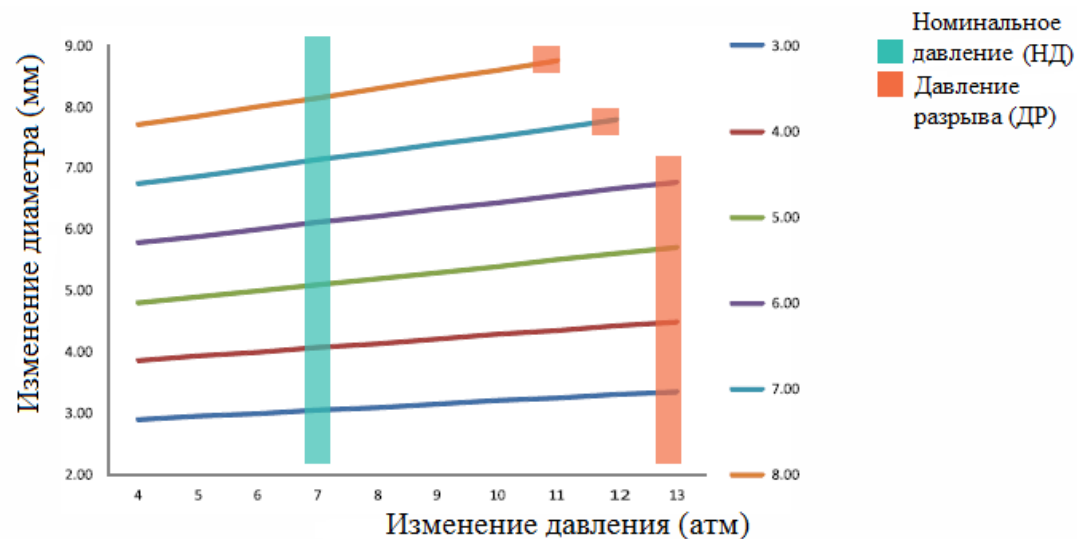


График - Растяжимость МОЗЕК ЧКТА для длины 120 мм

